


И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я



Ultimate Comfort Smart





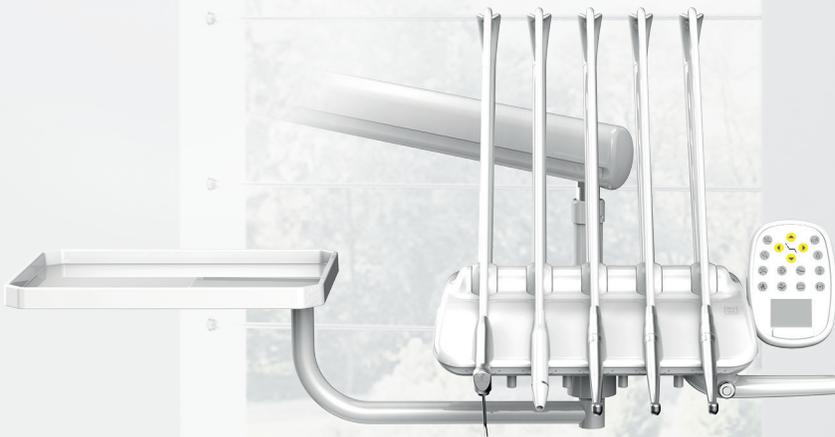

Р а з у м н о и К а ч е с т в е н н о



Made by Ritter Germany 

Комфорт и Качество

Кресло установки имеет электромеханический привод и Синхронизацию поворота спинки и сиденья;
Эргономический дизайн удобный для врача;
Высокая надежность
и легкий доступ ко всем узлам и агрегатам;
Встроенная система очистки воды;
Многофункциональная ножная педаль,
управляет работой инструментов и движениями установки;
Поворотная керамическая плевательница;



И н т е л л е к т у а л ь н ы й к о м ф о р т


Кресло пациента

Эргономический дизайн кресла пациента для удобной посадки ;
Широкая и комфортная зона для перемещения врача;
Высококачественная кожаная обивка;
4 программируемых положения кресла +
последняя позиция;
Положение Trendelenburg;
Защитная функция кресла при наезде на препятствия;
Левый и правый подлокотник;
Двойной артикуляционный подголовник;



Модуль врача

Два варианта с нижней и верхней подачей инструментов; Возможность легкого и комфортного перемещения; для эффективной работы врача; Возможность компоновки инструментов по желанию;

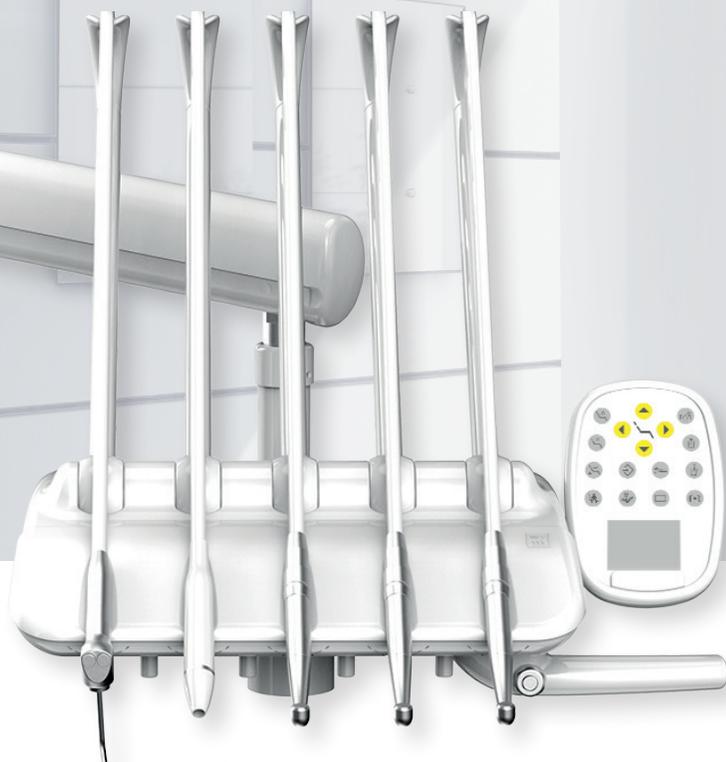

Верхняя подача инструментов «S»:

Интегрированная сенсорная панель управления со встроенным неготоскопом;
Столик для инструментов;
Пневматический механизм тормоза;
возможность установки до 5 инструментальных модулей;
4 программируемых положения кресла + последняя позиция;

Панель управления

- Сенсорные панели с рентгеновским прибором для просмотра изображений
- 4 программируемых кресла для пациентов позиции, плюс последняя позиция
- Съемная силиконовая прокладка для легкого демонтажа очистка и дезинфекция (S-Version)



Нижняя подача инструментов «Н»:

Интегрированная сенсорная панель управления со встроенным неготоскопом;
Встроенный столик для инструментов;
Пневматический механизм тормоза;
возможность установки до 5 инструментальных модулей
4 программируемых положения кресла + Последняя позиция;
Оптический датчик наличия инструмента;



И н т е л л е к т у а л ь н о е о с в е щ е н и е



Операционный светильник

**Бесконтактный светодиодный
светильник;**

Регулируемая интенсивность освещения
8.000-30.000 люкс;

Цветовая температура 5.000 К;

Съемные ручки для стерилизации;

Сконцентрированный свет на рабочем поле;

И н т е л л е к т у а л ь н а я
п о м о щ ь


Модуль ассистента

Интегрированная сенсорная панель управления;
Возможность установки до 4 позиций;
3-х функциональный пистолет;
Шланг слюноотсоса
Шланг пылесоса



Made by Ritter Germany



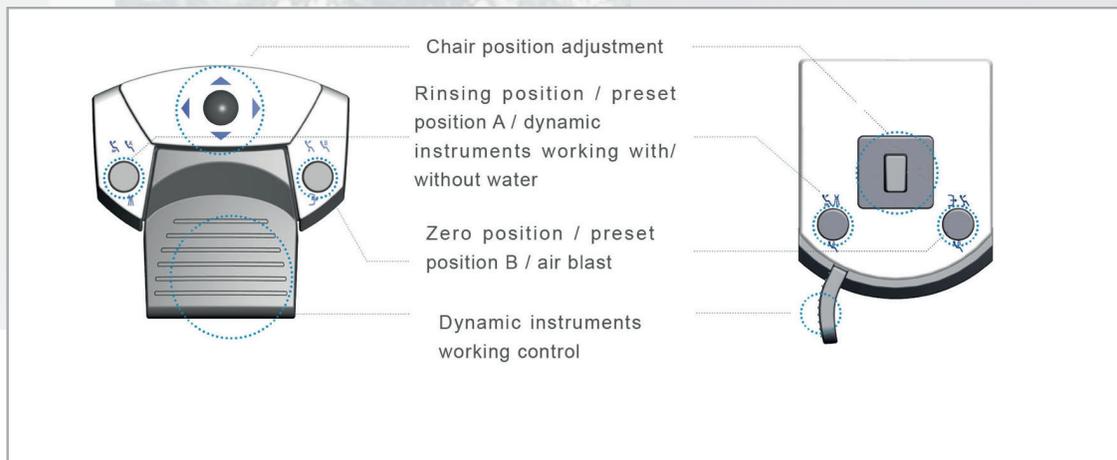

Интеллектуальная помощь

- Современный дизайн педали;
- Управление скоростью и мощностью активного инструмента;
- Включение и выключение подачи воды активного инструмента;
- Управление движениями кресла;
- Продувка активного инструмента;
- Управление программами кресла;



Standard lever type



Optional pedal type

Стул врача

Стул имеет современный и комфортный дизайн;
Спинка стула имеет регулировку по высоте и симметричную форму;
Стул имеет хромированный патрон и ножки;
5ти-лучевое основание с двойными роликами;
Возможность поставки стула с кольцевой подставкой для ног;



Цвета обивки кресла и стула



0# (PEA)	green
1# (PEB)	skyblue
5# (PEC)	orange
9# (PED)	light green
11# (PEE)	silver
13# (PEF)	grey
14# (PEG)	black
15# (PEH)	rose red
16# (PEI)	red
17# (PEK)	lemon
18# (PEL)	dark red
19# (PEM)	night blue

Shown samples may appear different in structure and colour due to the printing process.

И н т е л л е к т у а л ь н ы е о п ц и и

Базовые опции и дополнительные



STANDARD



OPTION



NOT AVAILABLE

Кресло пациента:

- Положение Trendelenburg; ●
- Сохранение положений кресла; ●
- Система защиты кресла; ●
- Двойной артикуляционный подголовник; ●
- Левый и правый подлокотник; ●
- Бесшовная обивка; ●
- Многофункциональная система управлением; ●

Модуль врача:

- Трех функциональный шприц; ●
- Два воздушных шланга с подсветкой; ●
- Бесщеточный электрический мотор Infinity; ○
- Пьезоэлектрический скалер Kolibri E с подсветкой; ○
- Неготокоп; ○
- Стандартный поднос для инструментов; ●

Модуль ассистента:

- Панель управления; ●
- Трех плоскостные движения модуля; ●
- Трех функциональный шприц; ○
- Шланг пылесоса; ○
- Шланг слюнососа; ○
- Полимеризационная лампа; ●

Гидроблок:

- Поворотная керамическая плевательница; ●
- Система подачи автономной воды; ●
- Бойлер нагрева воды; ●
- Набор для подключения внешней вакуумной помпы; ●
- Селективный клапан; ●
- Система Вентури; ●

Операционный светильник:


- Ritter LED ●
- Ritter SunLite LED ○

Стул:

- Mobilo Flex 50 ●
- Mobilo Flex 50 для ассистента ○

Мультимедийная система:

- Интраоральная камера ○

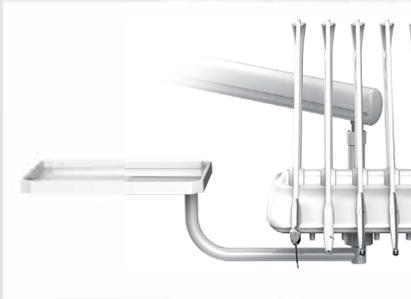

Ritter[®]
[THE DENTAL EXPERTS]

Made by Ritter Germany 



**GREEN
Dent**